

SANGRE OCULTA EN HECES

Recordar:

- Cribado poblacional CCR y pacientes asintomáticos: 1 muestra.
- Pacientes sintomáticos (diagnóstico): 3 muestras.


Información que debe saber:

- No realizar la prueba si presenta hemorroides sangrantes o menstruación hasta que no hayan pasado 3 días seguidos sin pérdidas de sangre.
- Evitar la contaminación de las heces con orina.
- No es necesario estar en ayunas ni seguir ninguna dieta antes de la realización de la prueba.
- Tomar medicación no interfiere en la realización de la prueba.
- No inferir el líquido del tubo. Si el líquido entra en contacto con los ojos, la boca o la piel, enjuagar con agua abundante y, si es necesario, consultar a su médico.
- Comunicar la pérdida de la prueba o cualquier inconveniente sufrido durante la realización de la misma a su centro de recogida.

INSTRUCCIONES PARA A LA RECOGIDA DE LA MUESTRA

Para garantizar el buen estado de la muestra, recoged las heces lo más cerca posible de la fecha de retorno.

1

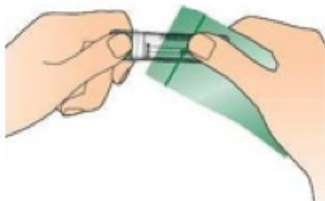


Extraer el tubo de la bolsa verde.

2




Colocar una capa de papel higiénico en el váter y sentarse, si es posible, de cara al mismo.

3

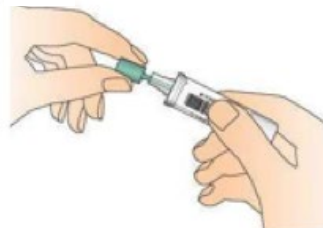

Desenroscar el tapón verde y extraer el bastoncillo.

4

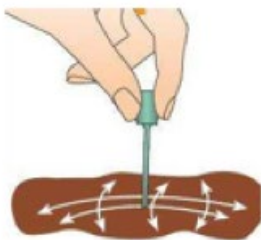

Poner en contacto la punta del bastoncillo con las heces y deslizar la punta dibujando líneas horizontales y verticales.

5



Es suficiente con poca cantidad de muestra. Tengan cuidado en mantener el exterior del tubo y la etiqueta.

6



Introducir el bastoncillo con cuidado dentro del tubo, taparlo bien y agitar durante unos segundos.

7



Guardar el tubo en la bolsa verde y devolverlo lo antes posible, a su centro de recogida. Mientras, conservar la muestra en la nevera (no congelar).

- El horario de entrega de muestras es de lunes a viernes de 07:00h a 11:00h, excepto los días festivo. Entregar a la administrativa de laboratorio.
- Puede entregarlo el paciente o algún otro familiar/usuario en su nombre con la tarjeta sanitaria del paciente y/o petición correspondiente.
- En caso de tener una analítica programada, puede traer muestra en el mismo momento.
- No se aceptará ninguna muestra mal recogida, facilitando nuevo recipiente para realizar nueva entrega.